

Gebrauchsanweisung | User Manual

Bracket AED Plus

P/N: 1042100002 (voherige P/N: 2100403032)

■ INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS

EINLEITUNG SICHERHEITSHINWEISE	1
VERWENDUNGSZWECK	2
LIEFERUMFANG	2
TECHNISCHE DATEN	3
ZUBEHÖR	3
MONTAGE	4
BEDIENUNG	5
REINIGUNG DESINFEKTION	6
VERWENDETE SYMBOLE	7
ENTSORGUNG	7
SERVICE HERSTELLER	7
WELCOME SAFETY INSTRUCTIONS	8
APPLICATION	9
SCOPE OF DELIVERY	9
TECHNICAL DATA	10
ACCESSORIES	10
INSTALLATION	11
OPERATION	12
CLEANING DISINFECTION	13
SYMBOLS	14
DISPOSAL	14
SERVICE MANUFACTURER	14

■ EINLEITUNG | SICHERHEITSHINWEISE

Lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Bracket AED Plus.

In dieser Anleitung finden Sie technische Informationen, Bedienungs- und Montagehinweise.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Bracket AED Plus in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für Nachschlagezwecke sorgfältig auf und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung oder Montage entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Das Rückhaltesystem ist nur mit dem ZOLL AED Plus® in Kombination mit der Softbag AED Plus (P/N 1042101002; vorherige P/N 2104833001) sicher zu verwenden.
- Instandsetzung und Wartung am Bracket AED Plus dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt direkt an den technischen Kundendienst der CRS medical GmbH. Jegliche Veränderungen an der Vorrichtung oder ihrem Zubehör, die nicht vom Hersteller vorgenommen werden, führen zu einem Außerkrafttreten der Gewährleistungs- und Haftungsverpflichtungen der CRS medical GmbH.
- Überprüfen Sie das Bracket AED Plus und benutzen Sie es nicht wenn:
 - mechanische Beschädigungen am Schließmechanismus zu erkennen sind
 - mechanische Beschädigungen an der Geräteaufnahme zu erkennen sind

■ VERWENDUNGSZWECK

Das Bracket AED Plus ist bestimmt für die sichere Halterung eines Defibrillator ZOLL AED Plus® nur in Kombination mit der unter dem Punkt Zubehör aufgeführten Tasche.

Die Halterung darf nur in räumlich geschützten Umgebungen verwendet werden. Dazu gehören massive Wände im Innenraum von Gebäuden und stabile Wände von EMS-Bodenfahrzeugen.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Gebrauchsanweisung des Defibrillators.

■ LIEFERUMFANG

1 Bracket AED Plus (P/N: 1042100002)

1 Gebrauchsanweisung

■ TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3000 g
Maße (HxBxT)	260x360x220 mm
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend


Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

■ ZUBEHÖR

Softbag AED Plus (P/N: 1042101002)

■ MONTAGE

Befestigen Sie das Rückhaltesystem mit 4 Schrauben M6 gemäß dem nachfolgenden Bohr-
bild.

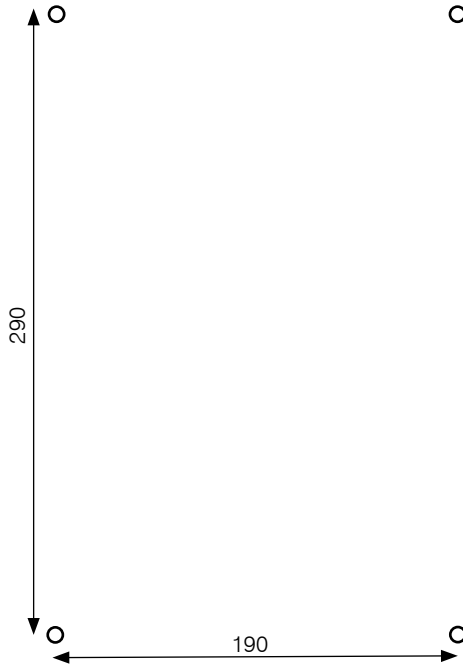


(Alle Angaben in mm)

■ **BEDIENUNG**

Öffnen

Entriegeln Sie den Halter durch Ziehen der Riegelachse und Anheben des Verschlusses.

Der Riegel rastet in der oberen Position ein. Das Gerät kann entnommen werden.

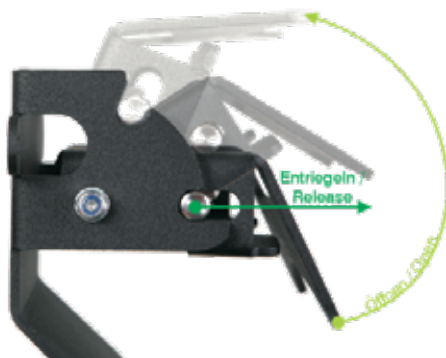

Schließen

Nachdem Sie den Defibrillator in der Halterung platziert haben, lösen Sie die Verriegelung und drücken den Verschluss nach unten bis die Verriegelung hörbar in der unteren Position einrastet.

Der Defibrillator ist nun gesichert.

■ REINIGUNG | DESINFEKTION

Bitte entnehmen Sie den ZOLL AED Plus® zur Reinigung aus der Halterung.

Das Bracket AED Plus kann mit einem feuchten, fusselreichen Tuch und handelsüblichen, milden Kunststoffreinigern gereinigt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Reinigungsmittel keine Lösemittel enthält.

Verwenden Sie zum Desinfizieren ebenfalls handelsübliches Desinfektionsmittel.

■ VERWENDETE SYMBOLE



Siehe Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise beachten



Referenznummer



Chargennummer



Hersteller

■ ENTSORGUNG

Verpackungen sind Rohstoffe und daher wiederverwertbar. Entsorgen Sie die-se im Interesse des Umweltschutzes sortenrein.

Weitere Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung erhalten Sie vom Hersteller.

■ SERVICE | HERSTELLER

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com

■ WELCOME | SAFETY INSTRUCTIONS

Welcome

Thank you for purchasing the Bracket AED Plus.

In this manual you can find technical information, instructions for use and installation.

Safety Instructions

- Read these instructions carefully before using the Bracket AED Plus.
- Keep these instructions in safe place for future reference and pay particular attention to the safety instructions.
- The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use, attachment, assembly or installation.
- This bracket is for use only with the ZOLL AED Plus® in combination with the Softbag AED Plus (P/N 1042101002; previous P/N 2104833001).
- Repair and maintenance of the Bracket AED Plus can only be performed by authorized personnel. Please consult directly to CRS medical GmbH Technical Support if the device is defective or damaged. Any changes to the device or its accessories which are not performed by CRS medical GmbH will void all product warranties. CRS medical GmbH will not be liable for unauthorized repair or maintenance.
- Inspect the Bracket AED Plus after every use and do not use if:
 - there is visible mechanical damage on the locking mechanism
 - there is visible mechanical damage on the holder

■ APPLICATION

The Bracket AED Plus is intended to be installed in ambulances which use the ZOLL AED PLUS® only in combination with the Softbag listed under accessories.

The holder may only be used in a protected environment. These include massive walls in the interior of buildings and stable walls of EMS ground vehicles.

Please also follow all manufacturer's instructions for the defibrillator.

■ SCOPE OF DELIVERY

1 Bracket AED Plus (P/N: 1042100002)

1 User Manual

■ TECHNICAL DATA

Weight	3000 g
Dimensions (HxWxD)	260x360x220 mm
Operating temperature	0°C to +40°C, 5% to 95% HR, non-condensing
Storage temperature	-30°C to +70°C, 5% to 95% HR, non-condensing


Subject to change without notice.

■ ACCESSORIES

Softbag AED Plus (P/N: 1042101002)

■ INSTALLATION

Mount the Bracket AED Plus with 4 screws size M6 according to the drilling diagram below.

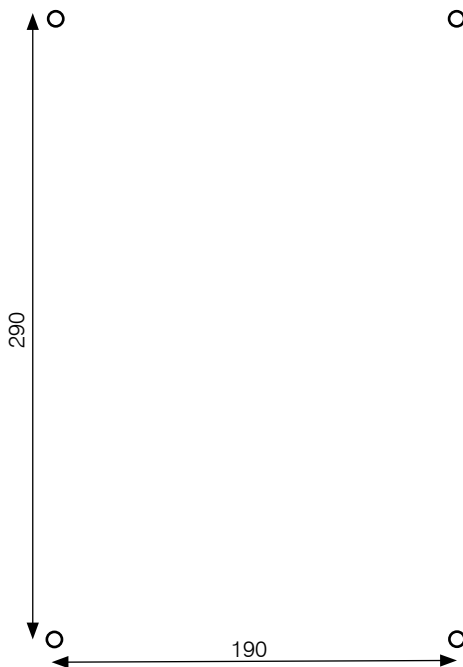


(All dimensions are in mm)

■ OPERATION

Opening

Unlock the bracket by pulling the locking bolt and lifting the locking device.

The locking device rests in the upper position so the device can be removed.

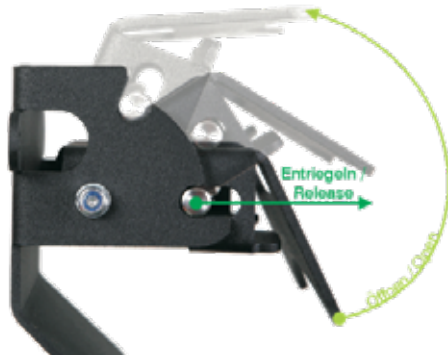

Closing

Insert the defibrillator and pull the locking bolt to unlock the locking device from the upper position. Press the locking device down until the locking bolt engages hearable in the lower position.

The defibrillator is now secured.

■ CLEANING | DISINFECTION

Please remove the ZOLL AED Plus® out of the bracket before cleaning.

The Bracket AED Plus can be cleaned with a damp, lint-free cloth and commercially available mild plastic cleaners. Please ensure, that the cleaner does not contain any solvents.

Commercially available disinfectants can be used for disinfection.

■ SYMBOLS



See user manual / note safety instructions



Reference



Lot number



Manufacturer

■ DISPOSAL

Packing is raw material and therefore recyclable. On behalf of environment protection please dispose the packing sorted. Dispose and recycle all packaging according to your local laws and regulations.

For more detailed information on nonpolluting disposal please contact service.

■ SERVICE | MANUFACTURER

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com

□ Loherstraße 6
□ D - 35614 Asslar

□ T: +49 6441 38331-0
□ F: +49 6441 38331-29

□ info@crs-medical.com
□ www.crs-medical.com

